


SENSA

3D Шиятцу массажер RT-2080

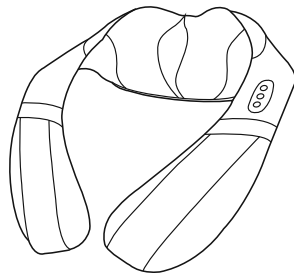

Инструкция по эксплуатации

Благодарим вас за приобретение нашего продукта. Перед использованием кресла обязательно прочтите «Руководство пользователя», особенно с рекомендациями по безопасности.



Обязательно сохраните «Руководство пользователя», оно может понадобиться вам в будущем.

Оглавление

Меры предосторожности	1
Название и функция каждой части	6
Структура массажера	6
Пульт управления	7
Описание кнопок	8
Метод Использования	9
Возможные способы использования	10
Уход и Хранение	11
Возможные неисправности	13
Техническая спецификация	14

Меры предосторожности

- Перед использованием, внимательно прочтите этот раздел
- Данный раздел поможет вам использовать массажное кресло корректно
- Пункты помеченные как «Внимание» и «Осторожно» должны быть строго соблюдены.

	ВНИМАНИЕ	некорректное использование может привести к травмам
	ОСТОРОЖНО	некорректное использование может привести к поломке

	означает «запущено»		означает «самостоятельно разбирать запрещено»
--	---------------------	---	---

Меры предосторожности

Люди проходящие следующее лечение, должны проконсультироваться с врачом перед использованием.



ВНИМАНИЕ

- Люди использующие электронные имплант , подверженные электромагнитному воздействию.
- Люди имеющие опухоль.
- Люди с сердечными заболеваниями.
- Беременным женщинам или недавно родившим.
- Больных остеопорозом, а также людям с переломом кости или растяжением мышц.
- Люди с кожными заболеваниями.
- Люди с повышенной температурой (более 38 градусов)

Меры предосторожности с пультом управления



ОСТОРОЖНО

- Не нажимайте кнопки мокрыми руками
- Не распыляйте жидкость на кнопки
- Не ставьте тяжелые предметы на пульт управления

Меры предосторожности

Окружающая среда



ВНИМАНИЕ

- Не используйте массажер когда температура окружающей среды более 40 градусов
- Не используйте массажер в сильно влажных или пыльных помещениях
- Не используйте массажер на улице
- Если вы принесли массажер из холодного места в теплое, подождите 1 час перед включением.

Сетевой шнур



ВНИМАНИЕ

- Используйте розетку соответствующую технической спецификации массажерам
- Когда отключаете шнур от розетки, не тяните за сам провод.
- Не допускайте перегиба вливания сетевого шнура
- Не повреждайте, не перегибайте и не завязывайте сетевой шнур
- Если сетевой шнур поврежден, не заменяйте его самостоятельно, свяжитесь с дилером его представителем для ремонта

Меры предосторожности

Вещи, которые надо знать перед использованием



ВНИМАНИЕ

- Не используйте массажер вместе с другими электронными приборами
- Массажер не предназначен для лечения
- Не используйте массажер в состоянии алкогольного опьянения.
- Только один человек может пользоваться массажером одновременно.
- Не рекомендуется использовать массажер сразу после еды.
- Если ваше самочувствие ухудшилось, не используйте массажер. Обратитесь к врачу.
- Не спите с включенным массажером.
- Рекомендованное время использования 15 мин за один сеанс.
- Не тяните за сетевой шнур. Держитесь за вилку.



- Не разбирайте массажер самостоятельно, чтобы избежать поломки
- Ремонт может осуществляться только специалистами компании продавца.

Меры предосторожности

Вещи, которые надо знать перед использованием



ЗАПРЕЩЕНО

- Если вы обнаружили брак или повреждения сетевого шнура, использовать массажер запрещено.
- Не используйте массажер во время грозы.
- Не допускайте попадание воды на массажер.
- Не вставляйте на массажер.
- Не позволяйте детям играть с массажером.




ОТКЛЮЧИТЕ
ШНУР

- Не трогайте сетевой шнур мокрыми руками.
- После использования массажера, всегда отключайте от розетки
- Если отключилось электричество, немедленно отсоедините массажер от розетки.


Название и функция каждой части

Структура массажера

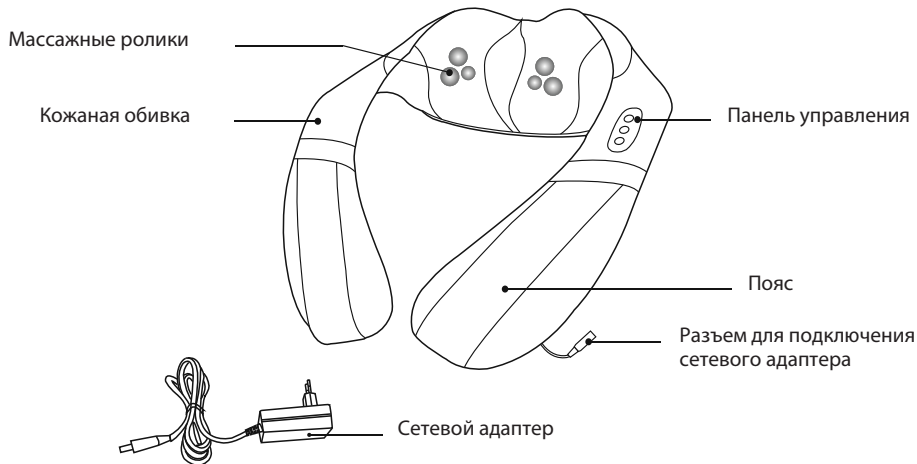

Название и функция каждой части

Пульт управления

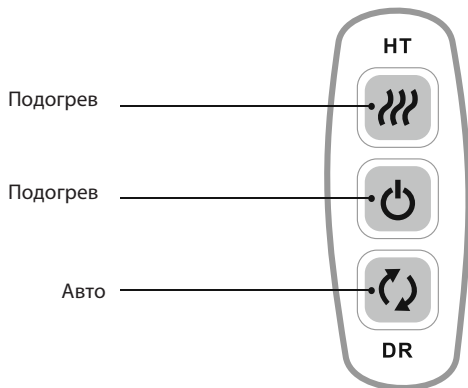

Название и функция каждой части

Описание кнопок



Кнопка включения

Изначально находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку, чтобы запустить режим массажа и подогрева. Время работы программы 15 мин.



Кнопка подогрева

Во время массажа нажмите данную кнопку чтобы включить инфракрасный подогрев. Подсветка массажных головок активируется. Нажмите кнопку еще раз, чтобы отключить подогрев. Подсветка погаснет.



Авто

Во время массажа нажмите данную кнопку чтобы поменять направление движения роликов. По часовой стрелки или против часовой.

Метод Использования

Инструкция по эксплуатации

- Проверьте данные рекомендации перед началом использования.
- Подсоедините сетевой адаптер к массажеру, затем подключите его в розетку. Ток должен соответствовать технической спецификации массажера.
- Массаж шеи и плечей. Положите массажер себе на шею и натяните его руками вниз. Убедитесь, что массажные ролики расположились равномерно справа и слева на вашей шеи.
- Нажмите кнопку включения , чтобы запустить массаж. Вы можете использовать массажные программы и подогрев на ваше усмотрение.
- Нажмите кнопку включения еще раз чтобы выключить массажер.
- Отсоедините массажер от розетки после использования.
- Храните массажер надлежащим образом если не будете использовать длительное время.




НАПОМИНАНИЕ

Не используйте массажер на голых участках кожи. Используйте легкую одежду, для большего комфорта.

Метод Использования


Возможные способы использования

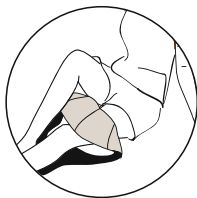


Икры



Стопы

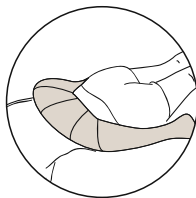

Поясница

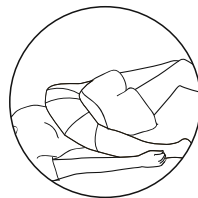

Живот



ОСТОРОЖНО

- Пожалуйста, снимите с себя все лишние предметы, мешающие массажу выбранной области.
- Придерживайте массажер руками для более комфортного массажа.
- После использования. Уберите массажер и не давайте детям играть с ним. Во избежания травм.

Уход и хранение

1. Уход

- Перед протиркой убедитесь что массажер выключен и сетевой шнур отключен.
- Используйте мягкую ткань для того чтоб протереть массажер.



ОСТОРОЖНО

- Не тяните за шнур мокрыми руками
- Не используйте воду для чистки массажера
- Не используйте чистящие средства
- Если продукт намок, не снимайте защитный чехол, дайте ему высохнуть так.

Уход и хранение

2. Хранение

- Убедитесь что сетевой шнур отключен.
- Протрите пыль. Не храните массажер в чрезмерно пыльных местах.

Обратите внимание

Пожалуйста обратите внимание на следующие симптомы перед использованием:

- Запах гари
- Не отходит ли шнур питания
- Не греется ли шнур
- Другие странности



ОСТОРОЖНО

- Если возникло что-либо из вышеперечисленного, воздержитесь от использования массажера.
- Отключите массажер от сети и свяжитесь с вашим дилером.
- Не разбирайте массажер самостоятельно.

Возможные неисправности

Проблема	Возможная причина	Решение
Слышен звук трения	Массажные ролики трутся об обивку массажера	Это нормально
Не работает	Нет питания	Подключите провод в розетку
	Кнопка питания выключена	Включите кнопку
	Включилась защита от перегрева	Дайте массажеру остыть

Если после этих действий неисправность повторится, свяжитесь с вашим дилером.



ВНИМАНИЕ

Не разбирайте данный продукт самостоятельно. Наша компания не несет ответственность за повреждения или травмы полученные при не правильном использовании продукта. Спасибо.

Техническая спецификация

Название: 3D шиацу массажер

Модель: RT-2080

Потребляемое напряжение: 120 V

Потребляемая мощность: 300 Вт

Массажер для ног RT-2080 – гарантия 1 год.

Гарантия распространяется только на непосредственного покупателя массажера и прекращается при смене владельца массажера.

Гарантия распространяется на дефекты материалов и сборки. Гарантия не распространяется на массажеры, находящиеся в коммерческом использовании.

Гарантия не распространяется на естественный износ материалов и их выцветание. В случае невозможности провести необходимый ремонт, Sensa оставляет за собой право заменить массажер на новый, адекватный по стоимости неисправному массажеру на дату приобретения. В этом случае расходы по доставке массажера несет его владелец.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки;
- нарушения правил эксплуатации;
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ;
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром;
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
- если в конструкцию массажера вносились изменения;
- использование изделия не по назначению;
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов;

В случае необходимости доставки массажера в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых SENSA гарантий. Все перечисленные выше гарантии действуют в случае, если письменное уведомление получено SENSA в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности.

Оно должно сопровождаться документом, подтверждающим факт совершения покупки.

Имя покупателя _____

Дата покупки _____

Адрес доставки массажера _____

Город _____

Телефон _____

Наименование товара _____

Компания - продавец _____

Адрес Продавца _____

Город _____

Телефон _____

