

## ▶ Гарантийный талон

### **Срок гарантии составляет 1 год с момента продажи.**

Гарантия распространяется только на непосредственного покупателя массажера и прекращается при смене владельца массажера.

Гарантия распространяется на дефекты материалов и сборки.

Гарантия не распространяется на массажеры, находящиеся в коммерческом использовании.

Гарантия не распространяется на естественный износ материалов и их выцветание.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, Sensa оставляет за собой право заменить массажер на новый, адекватный по стоимости неисправному массажеру на дату приобретения. В этом случае расходы по доставке массажера несет его владелец.

### **Гарантийное обслуживание не производится в случаях:**

- небрежного хранения или транспортировки;
- нарушения правил эксплуатации;
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ;
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром;
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
- если в конструкцию массажера вносились изменения.
- использование изделия не по назначению;
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов;

В случае необходимости доставки массажера в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец.


Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых SENSEA гарантий. Все перечисленные выше гарантии действуют в случае, если письменное уведомление получено SENSEA в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно сопровождаться документом, подтверждающим факт совершения покупки.

Имя покупателя \_\_\_\_\_  
Дата покупки \_\_\_\_\_  
Адрес доставки массажера \_\_\_\_\_  
Город \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_  
Наименование товара \_\_\_\_\_  
Компания - продавец \_\_\_\_\_  
Адрес Продавца \_\_\_\_\_  
Город \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_

# SENSA

Массажер для ног

**RT-1887**

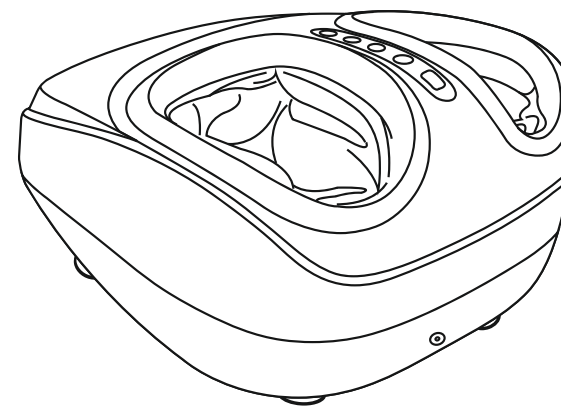

Инструкция по эксплуатации

## ▶ Возможные неисправности

проблема	возможная причина	решение
не работает	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Нет питания</li><li>2. Кнопка питания выключена</li><li>3. Включилась защита от перегрева</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Подключите провод в розетку.</li><li>2. Включите кнопку</li><li>3. Дайте массажеры остыть</li></ol>
перестал работать	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Отключилось электричество</li><li>2. Прошло массажное время (15 мин)</li><li>3. Массажер перегрелся</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверьте электричество</li><li>2. Включите массажер еще раз.</li><li>3. Дайте массажеры остыть и включите снова.</li></ol>

Если после данной проверки возникают неполадки.

Воздержитесь от использования.

## ▶ Спецификация

**Тип массажера:** Массажер для ног  
**Потребляемая мощность:** 50 W  
**Габариты в упаковке:** 39x33x20 см  
**Потребляемое напряжение:** 220 - 240 V

Спасибо что приобрели данный массажер,  
просьба внимательно прочитать инструкцию перед использованием.

Обратите особое внимание на меры предосторожности.

## ▶ Содержание

Меры предосторожности

Структура массажера

Описание функций

Как использовать массажер

Уход и хранение

Возможные неисправности

Спецификация



## ► Меры предосторожности

Внимательно изучите меры предосторожности перед использованием массажера, во избежание травм и повреждений массажера.



### Внимание

1. Внимательно изучите меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность при использовании.
2. Используйте массажер строго по инструкции.
3. Люди проходящие следующее лечение, должны проконсультироваться с врачом перед использованием.
  - 3-1. Люди использующие электронные импланты, подверженные электромагнитному воздействию.
  - 3-2. Люди имеющие опухоль.
  - 3-3. Люди с сердечными заболеваниями.
  - 3-4. Беременным женщинам или недавно родившим.
  - 3-5. Людям подверженным припадкам.
  - 3-6. Больных остеопорозом, а также людям с переломом кости или растяжением мышц.
  - 3-7. Люди с не зажившими ранами.
  - 3-8. В состоянии болезни или плохом самочувствие.
  - 3-9. Люди с нарушением кровообращения.
  - 3-10. Люди с иными физическим проблемами.
4. Отсоедините шнур питания после использования массажера или перед чисткой.
5. Используйте функцию подогрева с осторожностью. Не используйте данную функцию если ваша чувствительность понижена.
6. Не используйте массажер под одеялом, во избежание перегрева.
7. Не накрывайте массажер чем-либо во время использования.
8. Не допускайте детей и людей с ограниченными способностями к массажеру без присмотра.
9. Если почувствуете себе плохо, немедленно прекратите массаж.
10. Не используйте массажер, если провод поврежден. Если массажер упал, получил удар или попал в воду.

## ► Уход и хранение

### А. Уход

1. Выключите массажер и отсоедините от сети, перед чисткой.
2. Используйте только сухую и чистую тряпку.
3. Не используйте растворитель, бензин или спирт для чистки.

### В. Хранение

1. Если вы не пользуетесь массажером. Храните его в коробке. В безопасном, сухом, прохладном и вентилируемом месте.
2. Не перегибайте провод питания.
3. Не разбирайте массажер самостоятельно.
4. Храните массажер в недоступном для детей месте.
5. После длительного хранения, перед использованием, включите массажер и убедитесь что все световые индикаторы работают.

## ▶ Как использовать массажер

**A.**

Перед использованием  
Проверьте целостность массажера, отсутствие повреждений.  
Убедитесь, что он стоит на горизонтальной поверхности.

**B.**

### Способ использования.

**Шаг первый:** подключите массажер к сети.

1. Подсоедините выход провода к массажеру.
2. Подсоедините провод к адаптеру.
3. Подсоедините адаптер к сети.



**Шаг второй:** Сядьте в кресло  
и вставьте ноги в массажер.

**Шаг третий:** Нажмите кнопку  
включения, чтобы начать массаж.

**C.**

После использования

1. Нажмите кнопку включения  
снова, массаж прекратится.
2. Отключите провод питания от розетки.
3. Если вы хотите обесточить массажер,  
нажмите кнопку выключения  
и отсоедините шнур.
4. Данный массажер не предназначен  
для диагностики и лечения




6

### Осторожно

1. Если во время использования массажера ваше самочувствие  
ухудшилось, прекратите массаж и проконсультируйтесь с врачом.
2. Рекомендуемое время массажа не более 15 минут.  
Рекомендуемый интервал между использованием не менее 30 минут.
3. Не допускайте попадание воды на массажер.
4. Не используйте в ванной и других помещениях  
с повышенной влажностью  
Не соблюдение инструкции может привести с удару током  
или повреждению массажера.
5. Перед чисткой полностью отключите массажер от сети.
6. Не наступайте на массажер.
7. Не роняйте массажер.

3

## Структура массажера

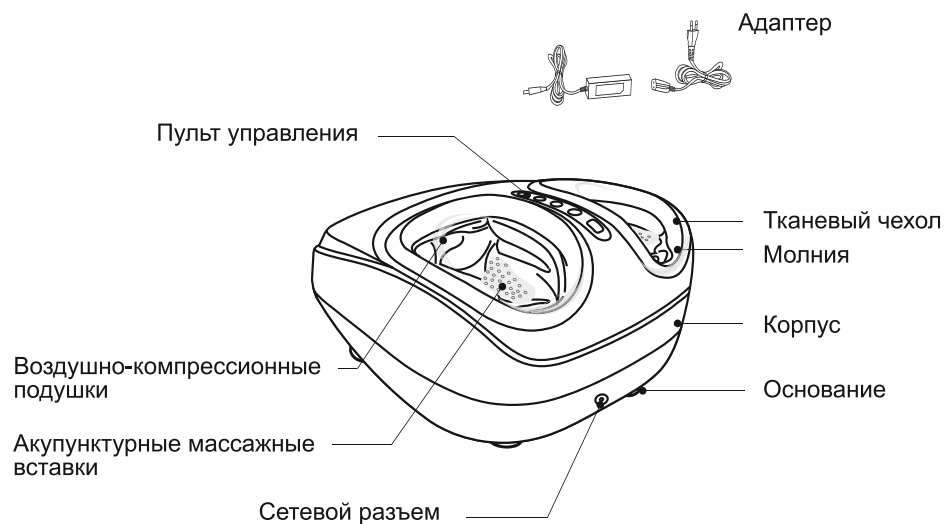

### Пульт управления



## Описание функций

### Anion

#### Ионизация

Кнопка ионизации: нажмите кнопку один раз для того, чтобы включить ионизацию, индикатор загорится. Нажмите кнопку еще раз для того, чтобы выключить ионизацию, индикатор погаснет.

### Heat

#### Подогрев

Кнопка подогрева: нажмите кнопку один раз для того, чтобы включить подогрев, индикатор загорится. Нажмите кнопку еще раз для того, чтобы выключить подогрев, индикатор погаснет. (Подогрев включен по умолчанию)

### Intensity

#### Интенсивность

Кнопка настройки интенсивности: нажимайте эту кнопку чтобы по кругу менять три уровня интенсивности массажа: средний, слабый, сильный. Красно синий индикатор — сильный уровень интенсивности. Красный индикатор — средний уровень интенсивности. Синий индикатор — слабый уровень интенсивности. (По умолчанию стоит средний уровень интенсивности)

### Mode

#### Режим

Кнопка выбора режима массажа: нажимайте эту кнопку чтобы по кругу менять два массажных режима. Режим 1 — красный индикатор. Режим 2 — синий индикатор. (По умолчанию стоит режим 1)

### Power

#### Вкл/Выкл

Кнопка включения / выключения: после того как массажер подключен к сети, нажмите эту кнопку, чтобы запустить массаж. Все индикаторы загорятся. Нажмите кнопку снова, массаж выключится, все индикаторы погаснут. (Время сеанса по умолчанию 15 минут)