


SENSA

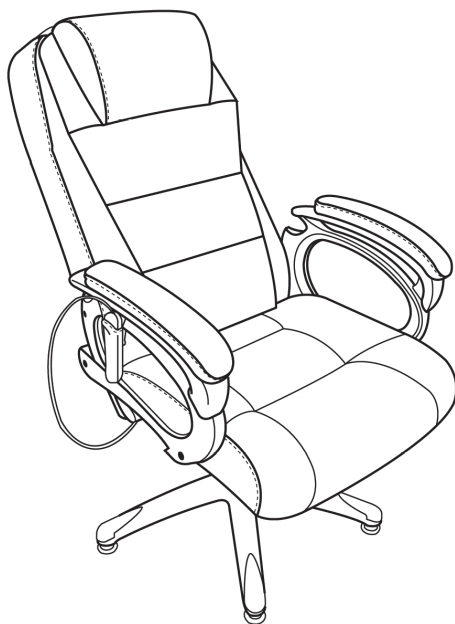

ОФИСНОЕ МАССАЖНОЕ КРЕСЛО RK-178

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение офисного массажного кресла.
Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием кресла для правильной эксплуатации. Уделите особое внимание требованиям безопасности использования.

Пожалуйста, сохраняйте данную инструкцию для использования в будущем.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Название: **Офисное массажное кресло**
Модель: **RK-178**
Напряжение: **12В**
Питание: **60Вт**

Мы оставляем за собой право модифицировать продукт, его дизайн и описание без ведома потребителя.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Особенности и меры предосторожности | 4 |
| Инструкция по монтажу | 5 |
| Описание компонентов и функций | 7 |
| Управление | 9 |
| Хранение и уход | 9 |
| Гарантийный талон | 10 |

ОСОБЕННОСТИ




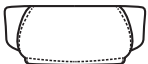
- 1 Три основных функции: шиацу, разминание и инфракрасная терапия.
- 2 Три массажных режима: верхняя часть спины, нижняя часть спины и вся спина.
- 3 Два режима разминания: роликовый массаж и разминание, разминание шеи и плеч.
- 4 Удобный пульт управления.
- 5 Питание 12В
- 6 Шейным массажный механизм можно отрегулировать по высоте на 6 см.
- 7 Высоту сиденья можно отрегулировать на 10 см.
- 8 Спинку можно откинуть на 135 градусов.
- 9 Время работы 15 минут.
- 10 После нажатия кнопки «Off» ролики вернуться в исходное положение в середине спинки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- 1 Следующие люди должны проконсультироваться с врачом перед применением кресла:
 - > Имеющие опухоль, серьезную болезнь, сильные боли.
 - > При плохом самочувствии или с высокой температурой.
 - > Во время лечения спины, шеи и плеч.
- 2 Перед тем как использовать функцию наклона спинки, сначала втолкните ключ опускающий/поднимающий сиденье внутрь и закрепите его.
- 3 Если кресло работает не корректно, пожалуйста, выключите его и обратитесь за помощью в сервис-центр компании дилера.
- 4 Не ставьте кресло рядом с водой или во влажном помещении.
- 5 Не скручивайте, не сгибайте, не наступайте и старайтесь не повредить провод питания. Будьте внимательны перемещая кресло, не переезжайте его колесиками.
- 6 Храните кресло в сухом и прохладном месте.
- 7 Рекомендуемое время массажа в день — 30 минут
- 8 Пожалуйста, после сеанса массажа, выключите кресло и отключите его из розетки.
- 9 Не вставляйте ничего лишнего в разъемы и отверстия кресла.
- 10 Если провод питания поврежден, пожалуйста, не используйте его. Обратитесь к дилеру для замены провода.
- 11 Дети могут использовать кресло только под присмотром взрослых.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


Комплектация

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Штырь | Стопор | Адаптер | Накидка на спинку кресла |

- 1 Достаньте кресло из коробки и поставьте на ровную поверхность. Извлеките стопор и штырь из держателя спинки на днище, в задней части сиденья. Поднимите спинку.

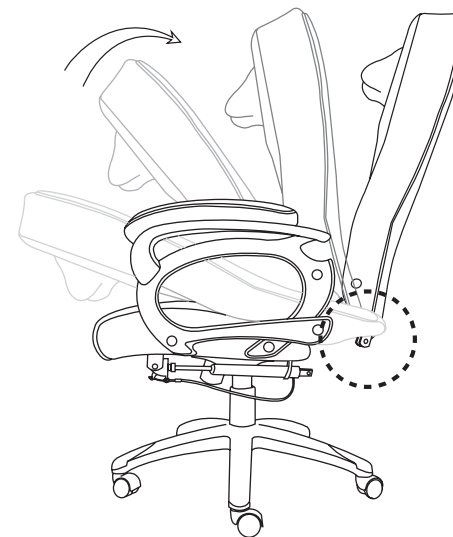


- 2 Используйте стопор, чтобы закрепить задний конец поршня в крепежной скобе спинки.

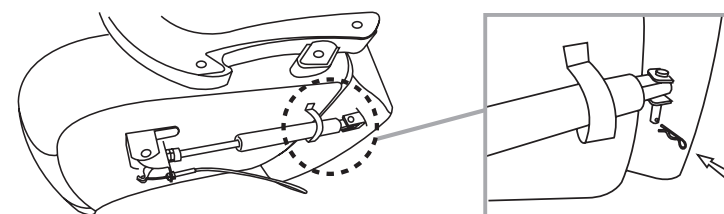


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

3 Установите накидку для спинки на кресло.

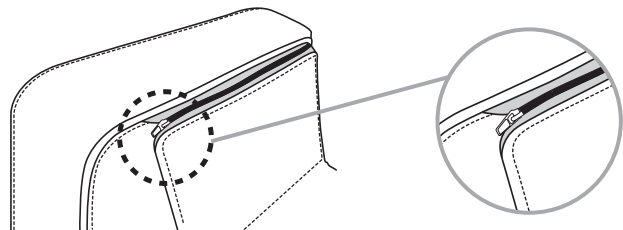


4 Сборка завершена.

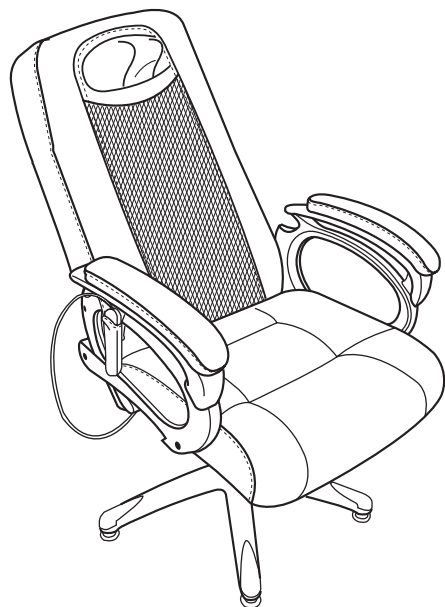


ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И КОМПОНЕНТОВ

Компоненты

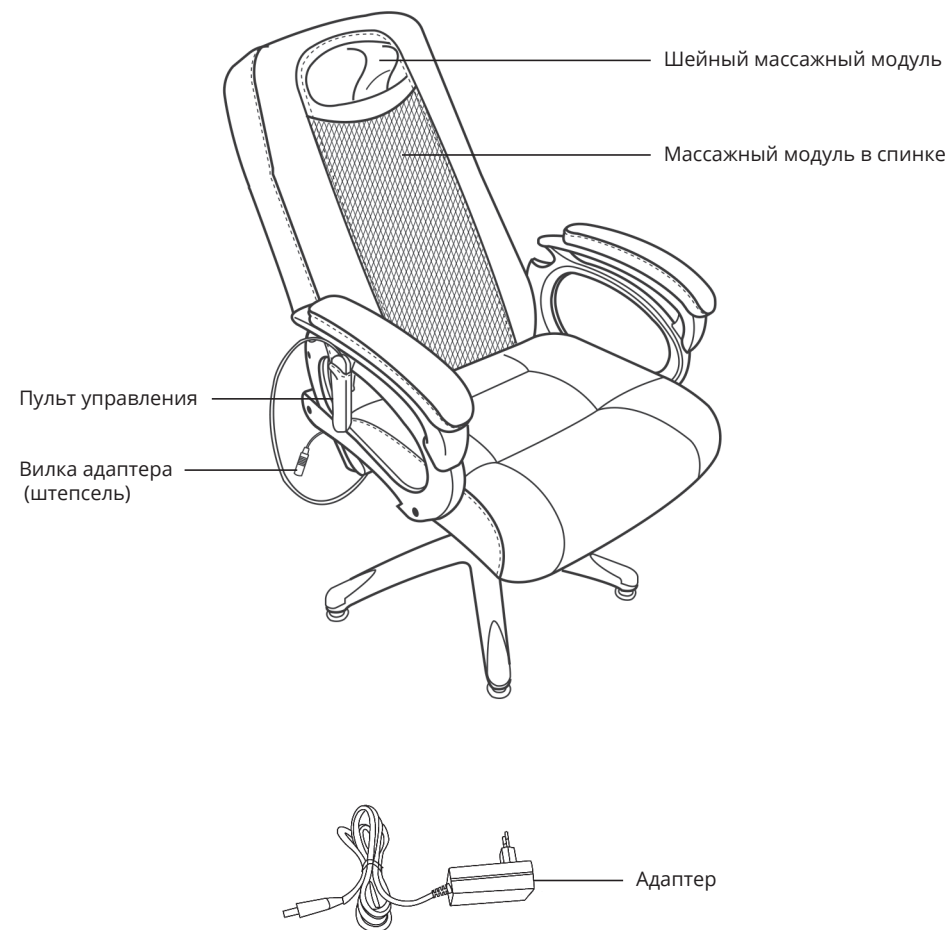

Функции

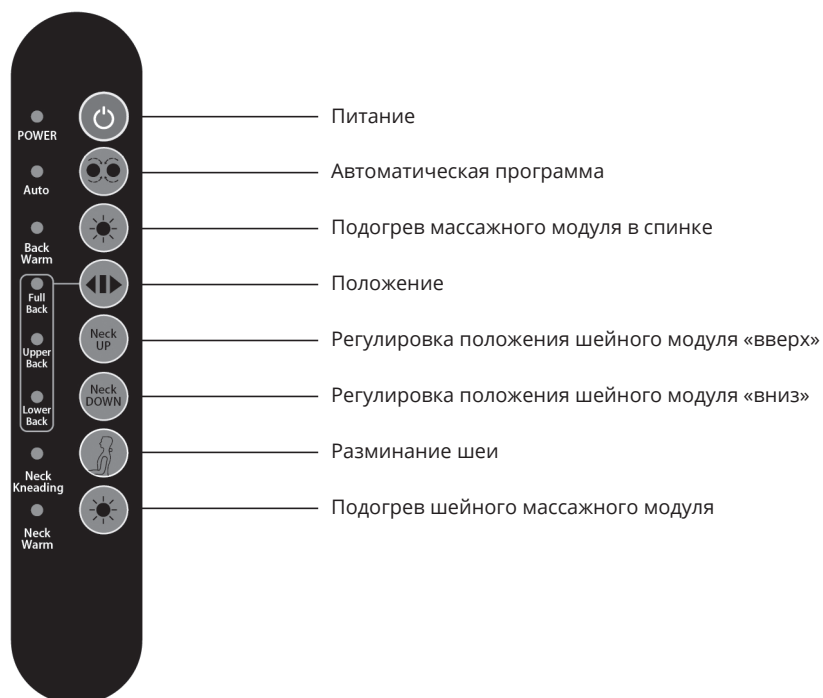

Инструкция по применению

- 1 Соедините штепсель с адаптером и воткните вилку в розетку.
- 2 Нажмите кнопку питания на пульте, кресло начнет работу. Включится автоматическая программа и массажный модуль в спинке начнет делать массаж спины, сначала нижней части, потом верхней. После 4х циклов кресло автоматически остановится и ролики вернуться в положение хранения.
- 3 Нажмите кнопку «Neck Warm» и шейный массажный модуль начнет греться. Нажмите еще раз — красный индикатор на пульте погаснет, функция нагрева отключена.
- 4 Нажмите кнопку «Положение», модуль с роликами начнет работать в режиме «Full Back» (вся спина).
 - > Нажмите эту кнопку еще раз, модуль начнет массировать верхнюю часть спины.
 - > Нажмите кнопку еще раз, модуль начнет массировать нижнюю часть спины.
- 5 Нажмите кнопку «Auto» и начнется автоматическая программа.
- 6 Нажмите кнопку «Neck Up» или «Neck Down» что бы отрегулировать положение шейного массажного механизма.
- 7 Нажмите кнопку «Neck Kneading», что бы начать массаж шеи. Нажмите еще раз, что бы отключить эту функцию.
- 8 Нажмите кнопку «Neck Warm», что бы включить подогрев шейного массажного модуля. Нажмите еще раз, что бы отключить эту функцию, индикатор на пульте погаснет.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- 1 Если кресло нуждается в ремонте, пожалуйста, обратитесь в сервис-центр компании дилера.
- 2 Не перегружайте кресло.
- 3 Пожалуйста, выключайте кресло из розетки, когда не пользуетесь массажем. Держите кресло в сухом и чистом месте.
- 4 Не устанавливайте кресло там, где на него будут попадать прямые солнечные лучи, рядом с обогревателями и другими предметами излучающими тепло — может привести к поломке.
- 5 Не используйте сильно-концентрированные и едкие моющие средства, когда очищаете кресло.
- 6 Выключайте кресло и отсоединяйте от розетки, когда чистите кресло. Используйте сухую тряпку.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного кресла Sensa компанией Nordbass в течение 1-го года со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером или сервисным центром компании Nordbass в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия распространяется только на непосредственного покупателя массажного кресла и прекращается при смене владельца.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, компания Nordbass оставляет за собой право заменить массажное кресло на новое, адекватное по стоимости неисправному массажному креслу на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажного кресла производился кем-либо кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки кресла в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец массажного кресла.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- > небрежного хранения или транспортировки;
- > нарушения правил эксплуатации;
- > механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ;
- > ремонтных работ, производимых не сервисным центром;
- > повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
- > использования изделия не по назначению;
- > неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- > блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов;

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляются за счет клиента.

Дата покупки _____

Наименование товара _____

Компания - продавец _____

Телефон _____

ФИО клиента _____

С правилами эксплуатации, противопоказаниями,
и рекомендациями ознакомлен. Претензий не имею. _____

(подпись, расшифровка)

Сервис-центры:

Москва, Новосущевская, 15, т.: (495) 730-51-41 / СПб, Кузнецовская, 10, т.: (812) 244-11-91

www.sensa-massage.ru
